

PERFEKTE TROCKNUNG UND MOBILER EINSATZ

Feuchtigkeit, Körpersekrete & Cerumen können die Funktion der Hörsysteme stark beeinträchtigen und Ausfälle verursachen.

Die neue **dry-cap uv 3[®]** ist Klassenprimus bei der Trocknung von Hörsystemen. Ein **Turbo-Ventilator** mit 7000 U/min und der **optimale Strömungskanal** leiten 4,89 m³/h **Luft direkt auf die Hörsysteme**. Die feuchte Luft kann über **seitliche Öffnungen** ungehindert **entweichen**.

Die **kühle Trocknung** ist für wiederaufladbare Hörsysteme, Cochlear-Prozessoren, In-Ear Monitore und Batterien **wichtig**.

Diese **schonende & perfekte Trocknung** erhält die Funktion der Hörsysteme und **verringert das Ausfall-Risiko und Reparaturen**.

Ein durch das mitgelieferte **USB-Kabel** voll aufgeladener LiPo Akku reicht für **5 volle Zyklen** im *Dry & Clean* Modus oder für **60 volle Zyklen** im *Clean Modus*.

Die neue dry-cap uv 3[®] bietet beste Hörsystem-Pflege & ist **mobil einsetzbar** dank integriertem LiPo Akku.



HIGHLIGHTS:



Schnell-Trocknung durch effizientes Luftgebläse



Hygiene durch UV-C Licht für Ihre Gesundheit



Gesundheitsförderndes Blau-Licht



Einfachste Bedienung durch taktile Tasten




Wiederaufladbar durch USB-Standard



Schwerkraftsensor für Sicherheitsabschaltung



Automatische Abschaltung nach 2 Stunden

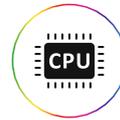

Alle Funktionen überwacht durch Mikroprozessor



Energiesparend, schonend und absolut sicher

EASY CLEANING

dry-cap uv 3[®]

Wiederaufladbare Trockenstation für Hörsysteme und mehr ...



- Perfekte Schnell-Trocknung** durch Luftgebläse
- Hygienische Reinigung** durch UV-C Licht
- Für **batteriebetriebene & wiederaufladbare Hörsysteme**
- Gleichzeitiges Trocknen & Laden** der Hörsysteme

 LiPo Akku für bis zu **5** volle Zyklen

DRY & CLEAN MODUS

(2 Stunden)

Der *Dry&Clean* Modus ist ein **Automatikprogramm** und kombiniert **schnelle Trocknung** durch ein effizientes Luftgebläse mit **UV-C Licht** am Anfang und am Ende der Trocknungszeit für **perfekte Hygiene**.



LiPo Akku für bis zu **60** volle Zyklen 

CLEAN MODUS

(2 Minuten)

Der *Clean* Modus ist ein **Kurzzeit-Hygieneprogramm** und startet das optimierte **UV-C Licht**, bei dem wirkungsvoll bis zu **99,9 %** der sich im Haushalt befindlichen **Keime, Bakterien, Viren & Pilze** eliminiert werden.

BESTE HYGIENE FÜR IHRE HÖRSYSTEME

Mit ultraviolettem Licht (**UV-C**) werden **alle Viren, Bakterien und Pilze** wirksam zu **99,9%** beseitigt.


Die **2 Phasen à 2 Minuten** zu Beginn und zum Ende der Trockenzeit garantieren **Keimfreiheit** auch, wenn die Hörsysteme zwischenzeitlich entnommen werden.

Die **Qualitäts-UV-C Röhre** mit 253,7nm Wellenlänge und die **Blaulicht-Dioden** mit 465nm sorgen für optimale Hygiene.

Das **verlängert die Lebensdauer** Ihrer Hörsysteme deutlich. Zugleich beugt die **klinische Sauberkeit** auch Risiken einer **Ohrinfektion** vor und schützt so Ihre Gesundheit.

MEHRFACHNUTZEN

Per Tastendruck führt die neue dry-cap uv 3® automatisch den 2-Minuten UV-C Schnell-Hygiene-Modus aus, welcher 99,9% aller Viren, Bakterien und Pilze wirkungsvoll eliminiert. Unter der Haube können zum Beispiel auch folgende Utensilien hygienisch gereinigt werden:

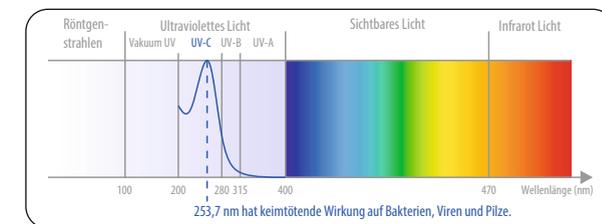

Die neue dry-cap uv 3® bietet **klinische Sauberkeit und Hygiene im Haushalt** und schützt die Gesundheit der ganzen Familie.